

Sani-Cloth®
GERMICIDAL DISPOSABLE WIPE
TOALLITAS GERMICIDAS DESECHABLES

AF3

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.



GENERAL GUIDELINES FOR USE

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO




1. Prepare the bucket. Remove the lid. Next, tear open refill at notch. Always dispense through lid. Wear gloves when dispensing and using this product. Find center of wipe roll, twist corner of wipe into a point and thread through the hole in the pail lid. Pull through about one inch. Replace lid.

Prepare la cubeta. Retire la tapa. Luego, abra la recarga que se encuentra en la ranura. Siempre efectúe el despacho a través de la tapa. Utilice guantes cuando despache y utilice este producto. Encuentre el centro del rollo de paños, doble la esquina del pano para formar una punta y pásela a través del orificio de la tapa de la cubeta. Tire alrededor de una pulgada para que pase. Vuelva a colocar la tapa.



2. Cover the opening half way with one hand. Remove wipe with a uniform pull away from face and eyes. When not in use, keep lid closed to prevent moisture loss.

Cubra la mitad de la abertura con una mano. Retire la toallita de un tirón, en dirección contraria a la cara y a los ojos. Cuando no este usando las toallitas, mantenga la tapa cerrada para evitar la pérdida de la humedad.

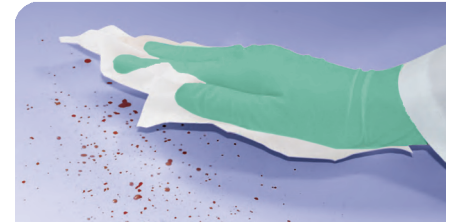

3a. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.

Si esta presente, retire las cargas pesadas del suelo antes de la desinfección.



3b. Unfold a clean wipe and thoroughly treat surface.

Despliegan un trapo limpio y completamente trate la superficie.



4. Allow surface to remain treated for three (3) minutes. Let air dry.

Permitir a la superficie tratada permanecer durante tres (3) minutos. Dejar secar al aire.



5. Do not reuse towelette. Dispose of used towelette in trash. Do not flush in toilet. When refill bag is empty, dispose of the bag in accordance with your facility's regulations for waste disposal and replace with a new fresh bag. If pail is cracked or broken, offer for recycling. If recycling is not available, discard in trash.

No vuelva a usar las toallitas. Deseche las toallitas usadas como basura. No las arroje en el inodoro. Cuando este vacía la bolsa de recarga, deséchela de acuerdo con las normas de su centro para la eliminación de desechos y reemplacela por una bolsa nueva. Si el cubo esta agrietado o roto, ofrecer para su reciclaje.



+PDI®
BE THE DIFFERENCE